


Appareil de beauté du cou

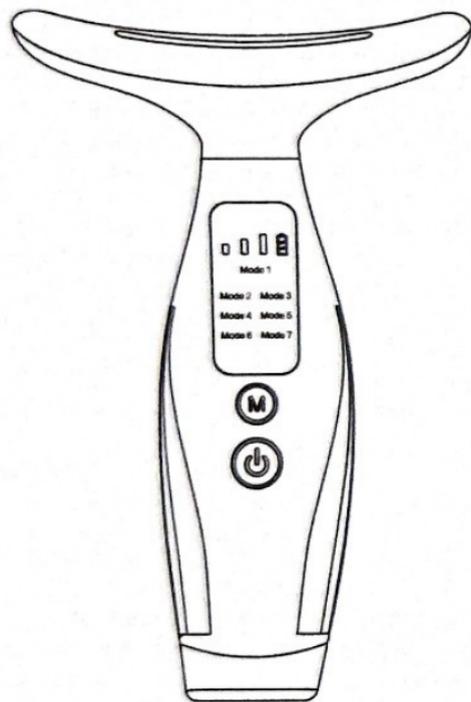


Manuel du produit

Paramètres du produit

Nom du produit	Appareil de beauté du cou
Numéro de produit	HY69
Taille du produit	139*90*38MM
Puissance nominale	3W
Adaptateur secteur	DC5V \equiv 1A (USB)
Temps de charge	3 heures

Définition du bouton

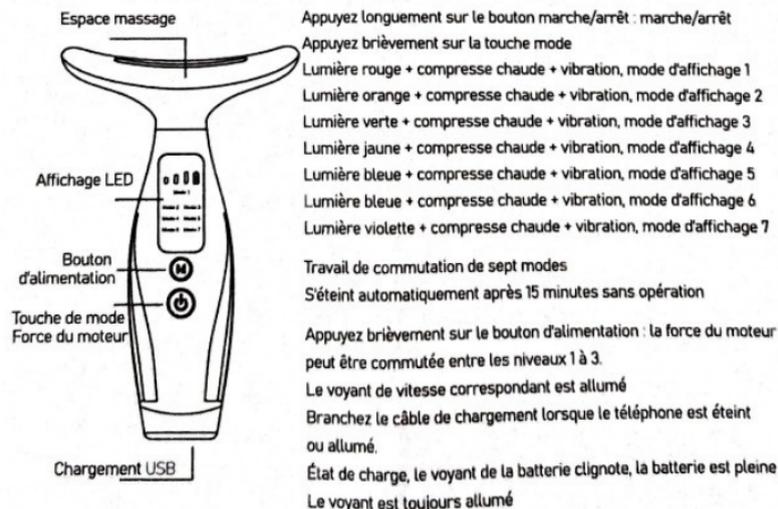

Entretien du produit

1. Veuillez essayer de conserver ce produit dans un environnement sec et à température ambiante ou dans une boîte de rangement.
2. Ne surchargez pas pour éviter d'endommager la durée de vie de la batterie.
3. Veuillez essuyer le produit après le chargement et le mettre dans la boîte de rangement s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. L'extérieur du produit peut être nettoyé avec de l'alcool ou un détergent dilué.
5. Pendant l'utilisation, l'appareil deviendra légèrement chaud, mais il est normal qu'il ne soit pas chaud.
6. Il est interdit de rincer le fuselage directement avec de l'eau.
7. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez charger la batterie au moins une fois tous les 3 mois.

Avertissement d'utilisation

1. Il est interdit de l'utiliser avec des appareils électromédicaux implantés dans le corps, tels que des stimulateurs cardiaques, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'équipement ou déclencher un danger.
2. N'utilisez pas ce produit si vos paumes présentent des problèmes de peau tels que des plaies, de l'eczéma, des ampoules ou une desquamation.
3. N'utilisez pas ce produit dans des endroits très humides tels que les salles de bains.
4. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
5. Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit sans autorisation. Peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement ou causer des blessures.
6. Veuillez ne pas donner ce produit à des enfants de moins de six ans pour éviter des blessures.