

NOTICE D'UTILISATION

DE L'APPAREIL DE LIFTING VISAGE À THÉRAPIE LED

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et utilisez-le correctement. Conservez ce manuel.
2. Ne démontez pas l'appareil, veuillez consulter le revendeur en cas de dysfonctionnement.
3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans le présent manuel.
4. Ne stockez pas ou n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où la température et l'humidité sont élevées, par exemple au soleil, près d'un feu, dans la salle de bain, etc. afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
5. N'utilisez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit humide, afin d'éviter tout risque de court-circuit, d'électrocution ou d'incendie.
6. Tenez l'appareil à l'écart des enfants et des personnes souffrant d'un handicap physique. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par un utilisateur de moins de 18 ans.
7. Tenez le dispositif hors de portée des enfants.
8. Les femmes enceintes, les personnes souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques ainsi que les personnes sensibles aux maladies de la peau ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT

1. Pour éviter tout dysfonctionnement ou incendie, cessez d'utiliser l'appareil en cas de chaleur inhabituelle.
2. Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le heurtez pas.
3. Veuillez appliquer un sérum sur le visage pendant le traitement.
4. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation est endommagé.
5. Veillez à ne pas utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
Maladie cardiaque, fièvre, maladie contagieuse, cancer, coupures ouvertes, maladie aiguë, hypotension, hypertension, stimulateur cardiaque, cœur ou poumon artificiel, pendant un traitement médical, maladie de la peau, coups de soleil, personnes trop sensibles, anaphylaxie.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

INTRODUCTION

Avec le temps, la peau peut devenir ridée, flasque et présenter des taches brunes. Cela est dû à l'exposition au soleil, au vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. Les produits de soin de la peau, tels que les sérums, les lotions et les crèmes hydratantes, agissent à la surface de la peau, mais ne peuvent généralement pas pénétrer en profondeur pour influencer le collagène situé dans les couches plus profondes de l'épiderme.

Les appareils de beauté à radiofréquence (RF et à stimulation musculaire électrique (EMS) stimulent la régénération du collagène, favorisent le resserrement de la peau et améliore le teint ainsi que l'apparence générale de la peau.

Pour optimiser l'efficacité de l'appareil, il est conseillé d'appliquer un sérum hydratant lors de son utilisation. Cela permettra de favoriser un fonctionnement plus doux de l'appareil et renforcer les bienfaits du soin.

Cet appareil est recommandé pour :

- Atténuer les rides et les ridules.
- Réparer les peaux endommagées par les UV.
- Prévenir le vieillissement de la peau.
- Traiter les peaux acnéiques, les peaux à imperfections et les taches pigmentaires.


Cet appareil de beauté combine 3 technologies pour garantir une efficacité optimale sur votre peau :

- La photobiomodulation LED à 5 couleurs
- La radiofréquence (RF) : La technique anti-âge de la radiofréquence est basée sur l'émission d'ondes électromagnétiques à très haute fréquence qui traversent la peau et génèrent de la chaleur dans les tissus sous-cutanés. Cette chaleur provoque une rétraction et une production de collagène, améliorant ainsi la fermeté et l'élasticité de la peau.
- L'électrostimulation (EMS) : Les impulsions électriques stimulent la production de collagène, vous offrant une peau plus ferme et un teint plus éclatant ! C'est également en profondeur que votre peau bénéficie des effets de cette électrostimulation faciale. Ce procédé atténue ainsi les signes de l'âge à la surface de l'épiderme tout en réparant la peau.

Chaque technologie est indolore et non irritante, assurant un traitement doux et non abrasif pour votre peau.

Pour de nombreuses personnes, l'utilisation de cet appareil peut éviter le recours à des injections coûteuses et douloureuses visant à faire pénétrer des produits cutanés dans les couches les plus profondes de la peau.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

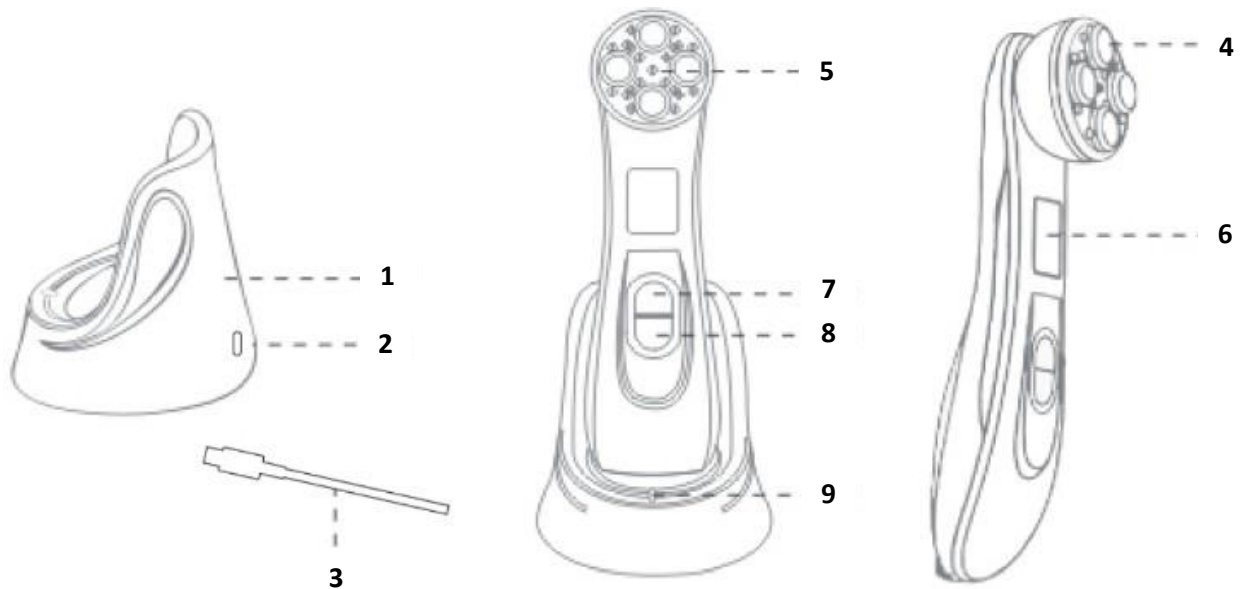

- 1 - Support de charge (socle en option)
- 2 - Prise de chargement
- 3 - Chargeur USB
- 4 - Tête métallique conductrice
- 5 - Panneau à LED

- 6 - Écran LCD
- 7 - Interrupteur (POWER)
- 8 - Touche de sélection des LED (LED SEL.)
- 9 - Témoin de charge

INSTRUCTION D'UTILISATION

1. Chargez l'appareil pendant 3h30 avant la première utilisation. Pour charger l'appareil, insérez le connecteur du câble USB dans l'appareil et l'autre extrémité du câble dans la prise de chargement, puis connectez l'appareil à une source d'alimentation.
2. Après avoir nettoyé votre peau, appliquez un sérum de votre choix sur la peau.
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'appareil (7 - Power). L'indicateur LED rouge s'allume.
4. Réglez l'intensité en fonction du type de peau et des préférences personnelles comme suit :
 - l'appareil se trouve au niveau d'intensité 1 par défaut lorsque vous l'allumez.
 - Appuyez une deuxième fois sur le bouton Power pour atteindre le niveau d'intensité 2.
 - Appuyez une troisième fois pour le niveau d'intensité 3.
 - Appuyez une quatrième fois pour le niveau d'intensité 4.
 - Appuyez une cinquième fois pour le niveau d'intensité 5.
 - Appuyez une sixième fois pour éteindre l'appareil.
- 5 - Déplacez lentement l'appareil sur votre visage de bas en haut et de l'intérieur vers l'extérieur. La peau peut être chaude pendant l'utilisation, ce qui est normal. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation.

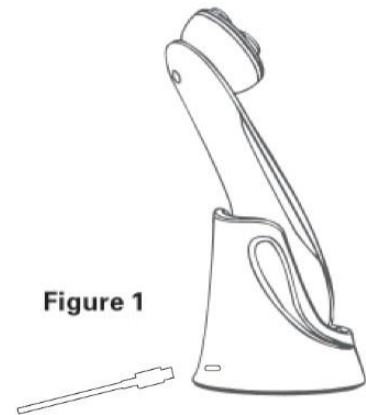


Figure 1

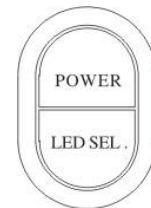


Figure 2

DURÉE D'UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 fois par semaine pendant 10 minutes à chaque fois. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation. Il est également recommandé d'utiliser un sérum hydratant pour maintenir la peau humide pendant le traitement.

TRAITEMENT PAR LA LUMIÈRE LED



Mode 1 : Traitement par lumière LED rouge

La lumière LED rouge est utilisée pour traiter la peau ridée et améliorer la régénération du collagène ainsi que l'élasticité de la peau. Appuyez une fois sur la touche de sélection LED (8 – LED SEL.) pour accéder au mode 1.

Mode 2 : Traitement lumineux par LED verte

La lumière LED verte est utilisée pour traiter les taches ou la décoloration de la peau en empêchant la surproduction de mélanine. Appuyez deux fois sur le bouton de sélection LED (8 – LED SEL.) pour passer en mode 2.

Mode 3 : Traitement par lumière LED bleue

La lumière LED bleue est utilisée pour traiter l'acné et la peau grasse. Appuyez trois fois sur le bouton de sélection LED (8 – LED SEL.) pour accéder au mode 3.

Mode 4 : Traitement par lumière LED jaune

La lumière LED jaune est utilisée pour raviver le teint et combattre la peau terne. Appuyez 4 fois sur le bouton de sélection LED (8 – LED SEL.) pour accéder au mode 4.

Mode 5 : Traitement par lumière LED rose

La lumière LED rose est utilisée pour lutter contre les taches foncées de la peau et blanchir la peau. Appuyez 5 fois sur le bouton de sélection LED (8 – LED SEL.) pour accéder au mode 5.

Mode 6 : Traitement par lumière LED rose clignotante

La lumière LED rose clignotante est utilisée pour faciliter la pénétration des produits de soin de la peau. Appuyez 6 fois sur le bouton de sélection LED (8 – LED SEL.) pour accéder au mode 6.

Éteindre la lumière LED :

Appuyez 7 fois sur la touche de sélection LED pour désactiver la fonction d'éclairage LED.

MÉTHODE D'UTILISATION

Méthode d'utilisation correcte :

La tête métallique entre entièrement en contact avec la peau



Méthode d'utilisation incorrecte :

Contact partiel du métal avec la peau



DONNÉES TECHNIQUES

Nom : instrument de beauté RF & EMS

Combinaison de 3 technologies : photobiomodulation LED, radiofréquence (RF) et électrostimulation (EMS)

Couleurs de LED : rouge, verte, bleue, jaune, rose et rose clignotante

Niveaux d'intensité : 5 niveaux d'intensité

Fonction arrêt automatique : après 10 minutes d'utilisation

Matériaux : ABS haut de gamme

Entrée : DC5V 500mA

Puissance : Max 10W

Capacité de la batterie : 750mAh

Autonomie en veille : 60 jours

Socle de chargement : en option

Temps de charge : 3h30 pour une utilisation de 2 heures

Dimensions : L 46 x H 165 x P 45 mm

Poids : 220 g

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

