

NOTICE D'UTILISATION

DE LA LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE LED POUR LA PEAU

INTRODUCTION

Veuillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET GÉNÉRALITÉS

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée. De plus, toute modification de l'appareil est interdite.

Veuillez installer l'appareil dans une pièce bien ventilée, à l'abri de la lumière directe tout en respectant ces recommandations :

- Température recommandée pendant la mise en route : entre 0 et 26 °C
- Température recommandée pour le stockage : entre 0 et 35 °C
- Taux d'humidité : inférieur à 80 %

Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et stable à une bonne distance du bord de la table.

PRÉCAUTIONS POUR LES RISQUES ÉLECTRIQUES

Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de l'utiliser proche d'une autre source de chaleur. Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le dispositif. Le courant haute tension peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas l'appareil si la fiche d'alimentation est endommagée. Débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

Si le produit ou la fiche sont endommagés, le produit doit être vérifié et réparé par un réparateur agréé. Veuillez contacter le vendeur pour la réparation si le produit est encore sous garantie. Les dommages causés par l'acheteur ne bénéficieront pas des conditions de garantie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Veuillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous souffrez de maladies cardiaques, de troubles mentaux et d'hypertension.
- En cas de maladies infectieuses de la peau.
- En cas de maladies inflammatoires cutanées.

RÈGLES DE RÉCLAMATION

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



INSTALLATION DE L'APPAREIL

- 1) Ouvrez l'emballage, sortez les éléments de l'appareil avec précaution. Assemblez les différentes parties en rentrant les câbles à l'intérieur de chaque module, dans les creux prévus à cet effet. Placez l'appareil sur une surface plane.
- 2) Retirez l'adaptateur d'alimentation, insérez la borne CC dans le connecteur CC de l'appareil et assurez-vous que la connexion de la borne soit stable.
- 3) Insérez la fiche CA de l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur. Lorsque l'alimentation est connectée, l'appareil émettra un "son" et entrera en état de veille.
- 4) Lorsque l'appareil n'est pas sous tension, l'écran de contrôle ne s'allume pas.

TRAITEMENT

Le temps de traitement recommandé est de : 30 à 45 minutes

Le nombre de séances par jour : 1 à 2 fois par jour

Chaque séance ne doit pas dépasser 60 minutes.


Grâce à sa conception 3D, cet appareil vous permet de traiter différentes parties du corps selon les besoins, en allant du visage aux pieds. Vous pouvez utiliser l'appareil sur le dos, sur le côté, assis ou sur le ventre.

FONCTIONNEMENT

Pour chaque couleur de lumière, vous pouvez choisir un niveau d'intensité entre 01 et 05. Appuyez sur le bouton correspondant à la couleur choisie. Le niveau d'intensité sera 01 par défaut. Une seconde pression sur ce bouton entraîne une augmentation de l'intensité au niveau 02 puis au niveau 03 et ainsi de suite. Le niveau d'intensité le plus élevé étant le niveau 05.

La fonction spray possède également 5 niveaux d'intensité. Lorsque l'écran affiche 00, cela signifie que la fonction est désactivée.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DE CONTRÔLE

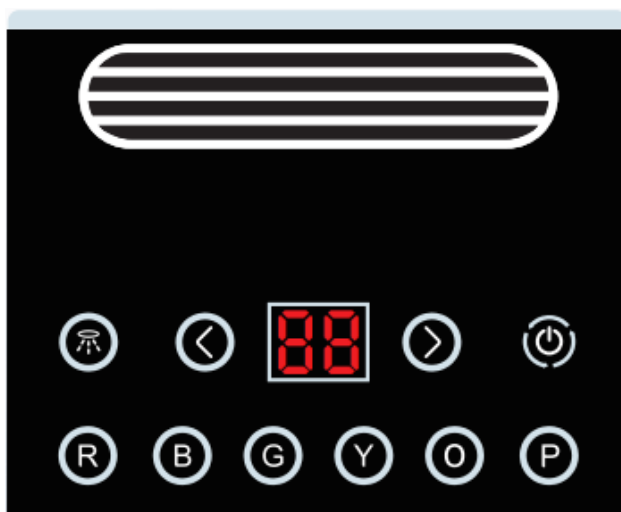

Bouton on/off

- 1) Après la mise sous tension, appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Par défaut, un temps de traitement de 30 mn s'affiche. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode de mise sous tension et revenir au mode veille.
- 2) En appuyant longuement sur ce bouton (2-3 secondes), l'appareil émettra un son et entrera dans le mode « enchaînement de couleurs » : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu et violet.

A noter :

- Quand la fonction « enchaînement de couleurs » est activée, l'écran de contrôle passe de la lumière rouge à la lumière orange, jaune, verte, cyan, bleue et violette.
- Les différentes couleurs de lumière ne peuvent pas être allumées en même temps.
- Quand le mode "enchaînement de couleurs" est sélectionné, le niveau d'intensité de la lumière passe automatiquement au niveau 5 et ne peut pas être réduit.



Lumière rouge (647-760 nm)

La lumière rouge dont les longueurs d'ondes se situent entre 647 et 760 nanomètres permet la régénération des cellules en profondeur, répare la peau abîmée, lutte contre les rides ou ridules et favorise la production de collagène et d'élastine.



Lumière bleue (430-455 nm)

La lumière bleue dont les longueurs d'ondes se situent entre 430 et 455 nanomètres agit sur les problèmes d'acné et la régulation du sébum grâce à ses propriétés bactéricides.



Lumière verte (492 - 550 nm)

La lumière verte dont les longueurs d'ondes se situent entre 492 et 550 nanomètres éclaircit les tâches d'hyperpigmentation et booste le teint.



Lumière orange (588 - 647 nm)

La lumière orange (588 - 647 nanomètres) allie les lumières jaune et rouge pour revitaliser la peau et fait ressortir l'éclat du teint.



Lumière jaune (550 - 580 nm)

La lumière jaune (550 - 580 nanomètres) est utilisée pour calmer les rougeurs. Elle améliore la circulation sanguine et lymphatique.



Lumière violette (360 - 430 nm)

La lumière violette (360 - 430 nm) permet de traiter l'acné et les cicatrices de l'acné en profondeur. Pour un traitement efficace, la lumière violette émet des rayons UV en faible quantité, sans danger pour la peau.



Pulvérisation fine par ultrasons

Une option spray diffusant de fines particules d'eau est à votre disposition. Les fines particules d'eau pénètrent dans la peau en profondeur pour préparer la peau au soin, de manière optimale. Il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée. Veuillez noter que les produits cosmétiques ou les huiles essentielles sont interdits. Pour un meilleur résultat, vous pouvez appliquer un masque facial lors de votre séance.



Augmentation du temps

Par défaut, le temps de traitement affiché est de 30 minutes. Après avoir sélectionné la couleur souhaitée, appuyez sur ce bouton. Le temps augmentera de 5 minutes à chaque pression, pour atteindre une durée maximale de 60 minutes. Si vous continuez à appuyer sur cette touche, vous passerez à 00 minutes de temps de traitement. La programmation peut aller de 00 à 60 minutes.



Diminution du temps

Par défaut, le temps de traitement affiché est de 30 minutes. Après avoir sélectionné la couleur souhaitée, appuyez sur ce bouton, le temps diminuera de 5 minutes à chaque pression. Si vous continuez à appuyer sur cette touche, vous passerez à 00 minutes de temps de traitement. La programmation peut aller de 00 à 60 minutes.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- 1) Il est interdit de regarder directement la lumière émise par l'appareil. En cas de traitement du visage, il est recommandé de porter les lunettes de protection fournies par le fabricant.
- 2) Les personnes ayant une peau allergique doivent effectuer un test sur une petite partie de la peau avant utilisation de l'appareil.
- 3) Si vous ne vous sentez pas bien après avoir utilisé cet appareil, vous devez arrêter le traitement immédiatement. Lorsque vous utiliserez votre appareil de nouveau, vous devez choisir un niveau d'intensité faible sur une courte durée. Puis vous pourrez augmenter la durée du traitement progressivement jusqu'à ce que votre corps s'adapte à cette technique de soin par la lumière.
- 4) L'appareil doit être placé dans un endroit frais, sec et ventilé, où les enfants ne peuvent pas l'atteindre. Il est interdit de le placer dans un environnement exposé aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des températures élevées.

- 5) Ne versez pas d'eau sur l'appareil, n'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- 6) Maintenez une certaine distance avec les autres appareils électriques et tenez-vous à l'écart des fortes interférences magnétiques et des produits inflammables et explosifs.
- 7) Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de réactifs chimiques acides ou alcalins puissants. Les petites cavités peuvent être nettoyées avec une brosse douce.
- 8) Il est interdit de placer un objet quelconque sur l'appareil y compris un téléphone portable, une carte bancaire ou autre carte magnétique.
- 9) Il est interdit d'insérer des objets conducteurs tels que des vis et des fils dans l'appareil pour éviter les brûlures, les courts-circuits, les incendies et les chocs électriques.
- 10) Les mineurs et les personnes ne disposant pas d'une activité autonome, d'une capacité de perception et d'expression doivent utiliser l'appareil avec l'aide de personnes majeures ayant une activité et une capacité de perception normales ou un professionnel.
- 11) Il est interdit d'utiliser des accessoires ou bien de démonter l'appareil.

MAINTENANCE

Lors de l'entretien de l'appareil, coupez l'alimentation et enlevez le cordon d'alimentation.

1. Nettoyez l'écran de contrôle et l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
2. Lorsque vous stockez le produit pendant une longue période, coupez l'alimentation et évitez de le placer dans un endroit humide.
3. Pour ranger l'appareil, démontez les 3 parties.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom : Lampe de luminothérapie LED pour la peau

Puissance : 45 W

Entrée : DC12V 4A

Fréquence : 50HZ/60HZ

Dimensions : 455 × 220 × 315 (mm)

Poids : 1.6 kg

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

