

# NOTICE D'UTILISATION

## MASQUE DE LUMINOTHERAPIE LED POUR LES YEUX

### INTRODUCTION

Veillez lire attentivement le manuel et notamment les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION DE VOTRE MASQUE LED

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir quelque maladie. Un professionnel de santé doit être consulté pour toute condition nécessitant une attention médicale.

Veillez à ne pas utiliser l'appareil :

- Si vous êtes une femme enceinte, un enfant ou une personne malade.
- Si vous prenez des médicaments qui provoquent une sensibilité à la lumière.
- Si vous présentez des lésions suspectes ou cancéreuses.
- Si après utilisation du masque LED, vous ressentez un malaise, veuillez arrêter la séance et consulter un médecin avant de l'employer à nouveau.

Testez votre sensibilité à la lumière avant de l'utiliser sur votre visage :

- 1) Mettez votre appareil sous tension.
- 2) Placez l'appareil sur votre bras et effectuez un traitement complet de 3 minutes.
- 3) Une fois, le traitement terminé, vérifiez visuellement la zone. Si la zone est devenue rouge et que cela dure plus de 2 heures, votre peau est sensible à la lumière. Veuillez interrompre l'utilisation.

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

- 1) Cessez d'utiliser l'appareil s'il surchauffe ou devient inconfortablement chaud.
- 2) Débranchez toujours l'appareil une fois la charge terminée.
- 3) Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est supérieure à 38° C, car cela pourrait endommager le revêtement en plastique.
- 4) Utilisez uniquement le cordon d'alimentation USB universel fourni. L'utilisation d'un cordon d'alimentation non standard pourrait endommager l'appareil.
- 5) Ne laissez pas tomber l'appareil sur des surfaces dures, car cela pourrait l'endommager. L'utilisation d'un appareil non conforme peut entraîner des blessures à la peau ou aux yeux.
- 6) N'utilisez pas l'appareil sur une zone du corps autre que le contour des yeux. L'utilisation du dispositif sur d'autres zones du corps n'a pas été testée et les risques sont inconnus.
- 7) Si la zone de la peau pour laquelle vous utilisez le dispositif semble s'aggraver, vous devez cesser l'utilisation et consulter votre médecin pour vous assurer que vous ne souffrez pas d'une affection plus grave.
- 8) Contactez votre médecin si vous avez des questions d'ordre médical.

### PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- 1) N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- 2) N'utilisez ou ne chargez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation USB (fourni) ou un adaptateur d'alimentation USB (non fourni) endommagé et/ou défectueux.
- 3) Ne pliez pas le câble du cordon de charge USB.
- 4) N'essayez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne doit pas être réparé par l'utilisateur. Cela annulerait la garantie.

## CONTENU DU COFFRET



Un masque pour les yeux



Un câble USB




Une attache ajustable



Un sac de protection

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

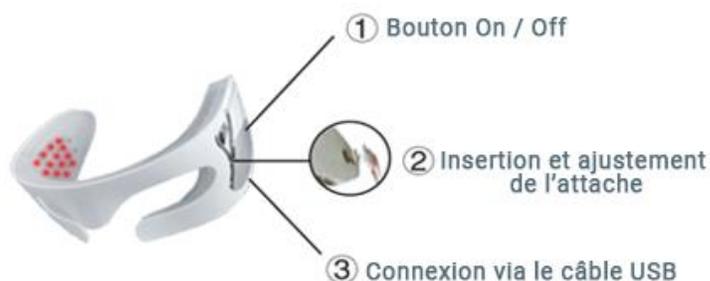


### COMMENT FONCTIONNE LE MASQUE DE LUMINOTHÉRAPIE LED POUR LES YEUX ?

Une peau jeune est riche en collagène, ce qui lui donne du volume et de la souplesse. Le collagène agit dans les couches profondes de votre peau pour l'aider à lutter contre la déshydratation et le relâchement cutané. Le collagène a également une action anti-oxydante et anti-radicalaire. Cependant, avec le temps, la peau produit moins de collagène et l'exposition au soleil endommage les fibres de collagène. Le manque de collagène peut entraîner l'apparition de rides, en particulier autour des yeux (pattes d'oie et rides du lion). Grâce au masque de luminothérapie Led pour la peau, les lumières émises vont pénétrer les couches de votre peau en profondeur pour stimuler la production de collagène, atténuant ainsi les rides et ridules. La vibration de l'appareil va permettre de masser la peau de vos yeux pour accélérer la circulation sanguine et améliorer l'élasticité de la peau. La peau de vos yeux sera ainsi raffermie, repulpée et plus ferme. Les poches et les cernes sous les yeux seront également atténués.

Ce masque anti-rides vous permet de profiter d'une séance de massage oculaire et de luminothérapie simultanément. Le masque est programmé avec une fonction d'arrêt automatique de 3 minutes pour des résultats anti-âge professionnels. Il permet de pratiquer des traitements quotidiens courts et simples dans le confort de votre domicile.

### Les différentes longueurs d'ondes de lumière utilisées :

Le masque LED pour les yeux combine 4 longueurs d'ondes LED : ambre (605 nm), rouge (630 nm), rouge profond (660 nm) et proche infrarouge (880 nm) pour un traitement puissant et ciblé.

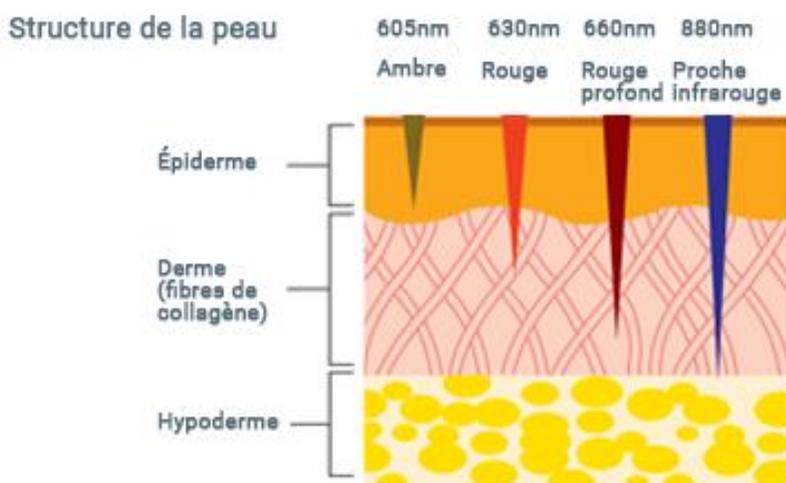

## **UTILISATION DE L'APPAREIL**

### **Mise en place :**

- 1) Déballez votre masque pour les yeux.
- 2) Branchez le cordon d'alimentation/de recharge USB sur le connecteur du port de l'appareil.
- 3) Branchez le cordon d'alimentation/de charge USB sur l'adaptateur d'alimentation USB universel (non fourni) et sur une prise de courant pour la charge.
- 4) Chargez votre masque pour les yeux 2 à 4 heures. L'appareil est complètement chargé lorsque le témoin lumineux passe du rouge au vert.
- 5) Placez l'appareil dans un sac de protection lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas ranger l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est supérieure à 38°C, car cela pourrait endommager le revêtement en plastique.
- 6) Un appareil entièrement chargé permet une utilisation de 30 mn, soit environ 10 traitements.

### **Mode d'emploi :**

- 1) Lavez et séchez complètement le visage avant utilisation.
- 2) Installez l'attache : insérer l'encoche dans la cavité latérale et faites-la glisser horizontalement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3) Placez l'appareil sur le visage, au-dessus des yeux, et ajustez l'attache pour qu'elle soit bien positionnée autour de votre tête.
- 4) Mettez l'appareil en marche. L'appareil vibre et la fonction lumineothérapie démarre. Après 3 minutes de traitement, le masque s'arrête automatiquement.
- 5) Retirez le dispositif et essuyez-le.
- 6) Placez l'appareil dans un sac de protection
- 7) Après le traitement, appliquez un sérum ou une crème hydratante de votre choix.

### **Conseils utiles pour de meilleurs résultats :**

- 1) Utilisez votre masque quotidiennement.
- 2) Utilisez l'appareil uniquement sur une peau propre.
- 3) Ne pas utiliser l'appareil après l'application d'une crème contenant une protection solaire, car cela pourrait bloquer la pénétration de la lumière.
- 4) Essayez l'appareil après chaque utilisation.

## **LES PREMIERS RÉSULTATS**

Les utilisateurs constatent généralement les premiers résultats au bout de 2 semaines. Toutefois, nous observons que les meilleurs résultats sont obtenus après un traitement de 10 semaines.

## **ENTRETIEN DE L'APPAREIL**

- 1) Éteignez l'appareil et débranchez-le de toute source d'alimentation.
- 2) Après chaque utilisation, essuyez le dessus des LED, avec des lingettes ou un chiffon humide afin d'éliminer tout résidu de peau. Ceci est particulièrement important si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes.
- 3) Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide en microfibres. Le sac de rangement en microfibres peut être utilisé pour nettoyer l'appareil. N'employez pas de nettoyants chimiques ou à base d'alcool sur l'extérieur car les produits chimiques agressifs risquent d'endommager les panneaux métalliques.
- 4) Laissez l'appareil sécher complètement avant de l'utiliser.

## **RÈGLES DE RÉCLAMATION**

La garantie ne s'applique pas :

- Si ce qui précède n'est pas respecté.
- S'il y a eu une intervention non autorisée sur l'appareil.
- Si l'appareil a été malmené, soumis à un traitement brutal ou à toute autre forme de dommage. Si des défauts sont apparus en raison de défaillances du système d'alimentation.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Nom : masque de luminothérapie LED pour les yeux

Éclairage : 36 LED

Longueurs d'ondes : ambre (605 nm), rouge (630 nm), rouge profond (660 nm) et proche infrarouge (880 nm)

Mode automatique : lumière rouge et vibration

Temps de charge : environ 2 heures

Indicateur de charge : l'appareil est chargé lorsque le témoin lumineux passe du rouge au vert.

Temps d'arrêt : arrêt automatique après 3 minutes de traitement

Batterie : lithium polymère

Tension d'entrée : 3.7 V, 800 Ma

Puissance de sortie : 0.1 W

Dimensions : 21\*7.8\*11 cm

Poids : 110 g

Contenu du coffret : masque pour les yeux, attache ajustable, sac de rangement et câble USB (Adaptateur USB secteur non fourni).

## **ÉLIMINATION DU PRODUIT**

Le produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Conformément à la législation, le produit doit être éliminé de manière appropriée afin que les matériaux puissent être recyclés dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autorités locales compétentes ou l'entreprise d'élimination locale. Le produit est équipé du logo suivant :

